



GUÍA DE PRODUCTOS




Solución atornillada a nivel gingival

MIS CONNECT es un sistema de pilar fijo diseñado para reducir los micromovimientos y la filtración bacteriana a nivel del hueso y evitar interferencias en el sellado gingival a nivel periimplantario. CONNECT maximiza el concepto de restauración a nivel tisular, permitiendo que todo el proceso protésico y restaurador se realice alejado del hueso y a la altura elegida del tejido conectivo.

Ventajas del sistema CONNECT

- Evita interferencias en el sellado gingival a nivel periimplantario, transformando un implante a nivel crestal en un implante personalizado a nivel tisular.
- Realiza todo el proceso protésico alejado del hueso y a la altura deseada del tejido conectivo.
- Evita las desconexiones y reconexiones repetidas del pilar y protege el sello gingival periimplantario.
- Reduce los micromovimientos y la microfiltración bacteriana a nivel óseo.
- Aleja la plataforma protésica del hueso, lo que conduce a una menor remodelación ósea.
- Pilar sólido: sin chimenea de tornillo y sin contaminación.
- Flexibilidad para elegir la altura adecuada del CONNECT según el grosor de la mucosa.
- El perfil estrecho proporciona más espacio para el crecimiento del tejido blando.
- Garantiza la colocación de componentes limpios y estériles en contacto con la encía.
- Puede ser utilizado en restauraciones unitarias o múltiples, en odontología digital y tradicional, desde la restauración provisional hasta la definitiva.

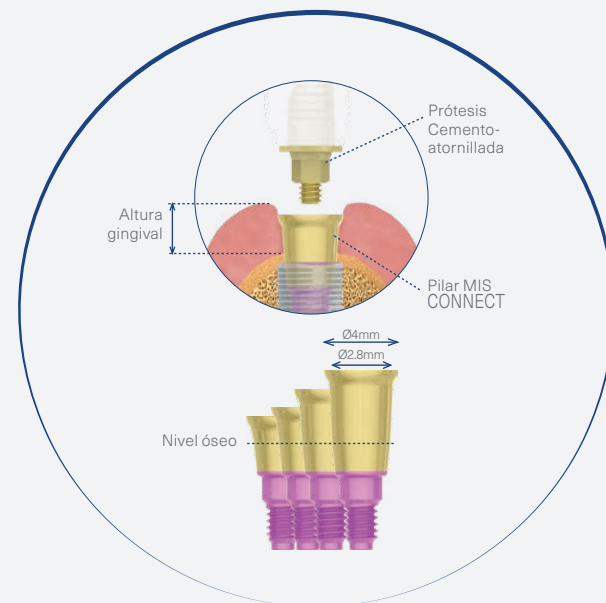

Casos indicados para CONNECT

- Procedimientos de un tiempo quirúrgico – con un pilar de cicatrización encima.
- Carga inmediata – con un pilar provisional encima.
- Procedimientos de dos tiempos quirúrgicos: implante sumergido, o CONNECT con pilar de cicatrización enterrado 0,5mm.
- Restauración unitaria.
- Restauración sobre múltiples implantes.

¿Con qué implantes se puede utilizar el pilar CONNECT?

Implantes de conexión cónica.

Tipo de conexión del pilar CONNECT

El CONNECT se fija al implante mediante una conexión cónica de 12° con un torque de 30 Ncm. La conexión interna que interactúa con la estructura superior es una conexión hexagonal doble, que permite 12 opciones diferentes de posicionamiento.


CONNECT e integración con flujo de trabajo digital

Los aditamentos y la conexión del sistema CONNECT se encuentran en las librerías de Exocad y 3Shape, pudiendo realizar prótesis atornilladas sobre el pilar, cementadas o cemento-atornilladas.

Instrumental necesario para utilizar CONNECT

- Para apretar el pilar CONNECT: Herramienta de inserción CONNECT.
- Para tornillos de prótesis y pilares de cicatrización: Destornillador MT-RDL30 - 0.05" ó 1,27 mm.
- Para impresión cubeta cerrada (MM-IC040): Llave de tubo MT-IT100.
- Para impresiones digitales: Scan body (MM-SP104) y apretar con destornillador MT-RDL30 - 0.05" ó 1,27 mm.
- Para angular el canal de acceso del tornillo (MM-SA160): Destornillador para carraca MT-ELR10 y/o MT-ELM10 para contra-angulo.

El pilar CONNECT se entrega estéril y sujetado por un vástago para su transporte.

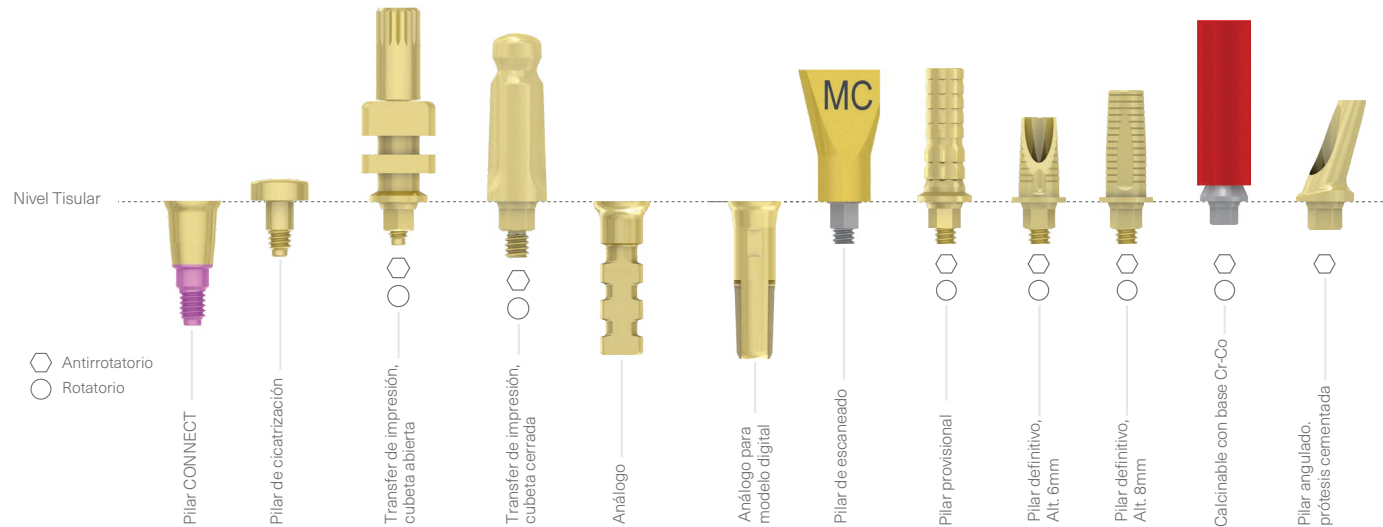

Pilares CONNECT

	CN-C2040	H=2mm, Ø4mm	Pilar CONNECT, conexión cónica, NP
	CN-C3040	H=3mm, Ø4mm	
	CS-C1540	H=1.5mm, Ø4mm	Pilar CONNECT, conexión cónica, SP
	CS-C2040	H=2mm, Ø4mm	
	CS-C3040	H=3mm, Ø4mm	
	CS-C4040	H=4mm, Ø4mm	

Análogos

	MM-RSM41	L=11mm, Ø4mm	Análogo CONNECT
	MM-MAN40	L=10mm, Ø4mm	Análogo digital CONNECT

Pilares de cicatrización

	MM-H0540	H=0.5mm, Ø4mm	CONNECT Pilar de cicatrización
	MM-H1540	H=1.5mm, Ø4mm	
	MM-H3040	H=3mm, Ø4mm	

Pilares temporales

	○ MM-TCI41	C=10mm, Ø4mm	CONNECT Pilar temporal, antirrotatorio
	○ MM-TC041	C=10mm, Ø4mm	CONNECT Pilar temporal, rotatorio

Scan Post

	○ MM-SP104	L=10mm, Ø4mm	CONNECT scan-post, antirrotatorio
--	-------------------	--------------	--------------------------------------

Llaves de inserción y Tornillos

	MT-CLR21	CONNECT Llave inserción larga, carraca
	MT-CSR21	

	MM-S0160	CONNECT Tornillo de prótesis
---	-----------------	------------------------------

	MM-SA160	Tornillo de prótesis para canal angulado (Venta por separado)
---	-----------------	--

Transfers de impresión

	○ MM-IOI11	C=11mm, Ø4mm	CONNECT Transfer largo para impresión de cubeta abierta, antirrotatorio
	○ MM-ICI40	C=8,3mm, Ø4mm	CONNECT Transfer de impresión, cubeta cerrada, antirrotatorio (Necesita llave MT-IT100)

Pilares definitivos

	○ MM-CE046	C=6mm, Ø4mm	CONNECT Pilar definitivo estético, rotatorio
	○ MM-CF048	C=8mm, Ø4mm	CONNECT Pilar definitivo estético, rotatorio
	○ MM-CEI46	C=6mm, Ø4mm	CONNECT Pilar definitivo estético, antirrotatorio
	○ MM-CFI48	C=8mm, Ø4mm	CONNECT Pilar definitivo estético, antirrotatorio
	○ MM-AN204	C=8mm, Ø4mm	CONNECT Pilar angulado, 20°, antirrotatorio
	○ MM-CCR04	C=14mm, Ø4mm	CONNECT Calcinable con base en Cr-Co, rotatorio
	○ MM-CCR14	C=14mm, Ø4mm	CONNECT Calcinable con base en Cr-Co, antirrotatorio


Paso a paso




1. Medir la altura gingival de la zona del implante con una sonda periodontal.




2. Elija la altura apropiada de pilar CONNECT, según la medición previa realizada. Para optimizar los resultados estéticos, seleccione un pilar CONNECT al menos 1mm por encima de la cresta ósea y 1,5mm por debajo del punto más bajo del margen gingival.

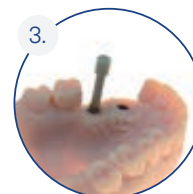

3. Utilice el transportador de plástico para atornillar el pilar CONNECT al implante. Luego retire la herramienta con un leve movimiento de flexión.

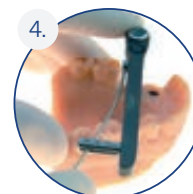

4. Apriete el pilar con un torque de 30Ncm, usando la herramienta de inserción del CONNECT. En caso de que el torque de inserción del implante sea inferior a 30Ncm, ajuste el pilar CONNECT con un torque manual. A continuación, al final del periodo de cicatrización pero antes de la impresión final, lleve el ajuste hasta los 30Ncm.

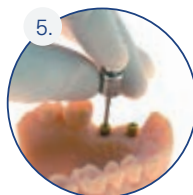


5. Coloque un pilar de cicatrización CONNECT durante el período de cicatrización gingival, usando un par máximo de 15Ncm. Si se realiza una restauración temporal apriete el tornillo con un torque de 20Ncm.




6a. Reapriete el pilar CONNECT con un torque de 30Ncm antes de tomar la impresión.

Para tomar una impresión sobre el pilar CONNECT:


a. Proceso restauración tradicional: Puede tomar impresiones usando transfers. En cada pack de tomas de impresión, se incluyen los tornillos cortos y largos.

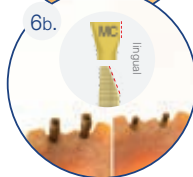

b. Proceso de restauración digital: Fije el scan-post al CONNECT, orientando el lado estrecho y plano hacia la dirección deseada del canal del tornillo y proceda al escaneado.

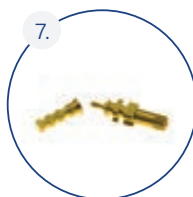

7. Use el análogo o análogo digital de acuerdo al proceso de impresión que se haya realizado.

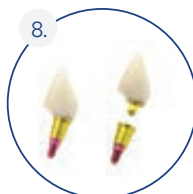

Utilice el pilar final para la reconstrucción final.

El pilar definitivo de la reconstrucción debe ser apretado a un torque de 30Ncm.

Cuando se realiza un canal de tornillo angulado, se debe utilizar el tornillo azul (vendido por separado, referencia MM-SA160) y utilizar la llave de prótesis de canal de tornillo angulado (MT-ELR10), con un torque de 25Ncm.

Nota: Cuando se realiza un puente sobre múltiples implantes, la divergencia máxima del pilar rotatorio definitivo es de 40° (20° por implante).



www.mbmgroupspa.cl | comercial@mbgroup.cl

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN CHILE MBM BUSINESS GROUP SPA.